

Instrukcja obsługi Depilatora laserowego T-011C



Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed użyciem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Środki ostrożności
3. Budowa urządzenia
4. Budowa ekranu wyświetlacza
5. Tryby pracy
6. Tryb chłodzenia
7. Test wrażliwości skóry
- 8 Jak używać
9. Przebieg zabiegów
10. Metoda odmładzania
11. Działania niepożądane
12. Specyfikacja
13. Rozwiązywanie problemów
14. Odpowiednie zastosowanie
15. Częste pytania

1. Wprowadzenie

Depilator laserowy Lescolton T-011C

Wielofunkcyjne urządzenie kosmetyczne to innowacyjne urządzenie z funkcją usuwania włosów, odmładzania skóry, łagodzenie zmian trądzikowych oraz chłodzenie i łagodzenie bólu podczas usuwania włosów. Urządzenie wykorzystuje emisję światła o częstotliwości ponad 350 000 impulsów. Jest to jeden z najbardziej profesjonalnych i pożądaných produktów w dziedzinie Zdrowie & Uroda.

Urządzenie oparte jest na technologii chłodzenia, depilator posiada niską temperaturę, dzięki czemu może działać jak chłodzący kompres, który łagodzi ból. W trybie chłodzenia usuwa nadmierne ciepło wytwarzane podczas depilacji laserowej. Ta funkcja zapobiega uczuciu pieczenia i bólu oraz pozwala na lepszą pielęgnację skóry niż przy użyciu zwykłego depilatora laserowego.

Odpowiednia grupa

Urządzenie jest odpowiednie dla mężczyzn i kobiet, którzy chcą usunąć dodatkowe owłosienie.

Odpowiednia skóra

Osoby o ciemnej skórze powinny zacząć od najniższego poziomu, a następnie dostosować się do odpowiedniego poziomu w zależności od zdolności adaptacyjnych skóry. Osoby o czarnej karnacji nie powinny używać tego urządzenia.

2. Środki ostrożności

Przeciwwskazania:

Nie używaj w żadnym z następujących przypadków:

- Dzieci i osoby starsze
- Osoby ze stanem zapalnym skóry
- Osoby ze światłoczułą skórą oraz osoby stosujące światłoczuły lek
- Osoby posiadające wszczepione medyczne urządzenia elektroniczne (np. rozrusznik serca) i systemy podtrzymywania życia (np. sztuczne płuco-serce), co może prowadzić do błędów elektronicznych urządzeń medycznych.

Ostrzeżenia

- Wysokie napięcie w urządzeniu. Nie wolno rozbierać urządzenia.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych podczas użytkowania. Jeśli służy do chłodzenia produktu.
- Nie dopuść do kontaktu wody ani wilgoci z urządzeniem.
- Nie używaj depilatora, gdy wtyczka lub przewód są uszkodzone.
- Używanie urządzenia w warunkach łatwopalnych lub wybuchowych jest zabronione.


Środki ostrożności

- Produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży lub próbujących zajść w ciążę, lub karmiących piersią.
- Urządzenie nie powinno być używane w sposób ciągły przez ponad 25 minut.
- Depilacje włosów można wykonać kilka razy na ten sam obszar tylko w przypadku dużego obszaru (pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie po 25 minutach, wyjmij wtyczkę zasilania i odczekaj minimum 10 minut do następnego użycia).
- Osoby korzystające z solarium, opalające się na słońcu lub używające samoopalacza nie powinny korzystać z tego produktu. Jeśli nie masz pewności, czy skóra jest opalona, czy spalona, zalecamy wykonanie testu wrażliwości skóry i odczekaj 24 godziny.
- Nie należy używać produktu bezpośrednio w kierunku tatuaży, ciemnobrązowych i czarnych plam.
- Użycie wokół oczu, szyi, sutków, narządów płciowych lub odbytu jest zabronione, ponieważ skóra na tym obszarze jest stosunkowo wrażliwa i szczególnie podatna na podrażnienia.
- Nie naświetlaj więcej niż 3 razy tego samego obszaru działa, w przeciwnym razie może wytwarzać się zbyt dużo ciepła, co sprawia, że skóra staje się podrażniona.
- Jeśli skóra wygląda na zaczerwienioną i trwa to dłużej niż 24 godziny po użyciu depilatora, zaprzestań użycia urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Zapobieganie

- Nie kieruj lampy na wrażliwe części, takie jak oczy, gdy światło jest emitowane. Należy nosić ochronne okulary podczas korzystania z urządzenia.
- Nie patrz bezpośrednio na światło emitowane przez lampę, a nawet na odbite światło, nawet gdy nosisz ochronne okulary.
- Przed użyciem upewnij się, że usunąłeś wszystkie metalowe przedmioty, takie jak platforma, bransoleta itd., Aby uniknąć wadliwego działania urządzenia.
- Produkt należy używać z dala od dzieci.


3. Budowa urządzenia

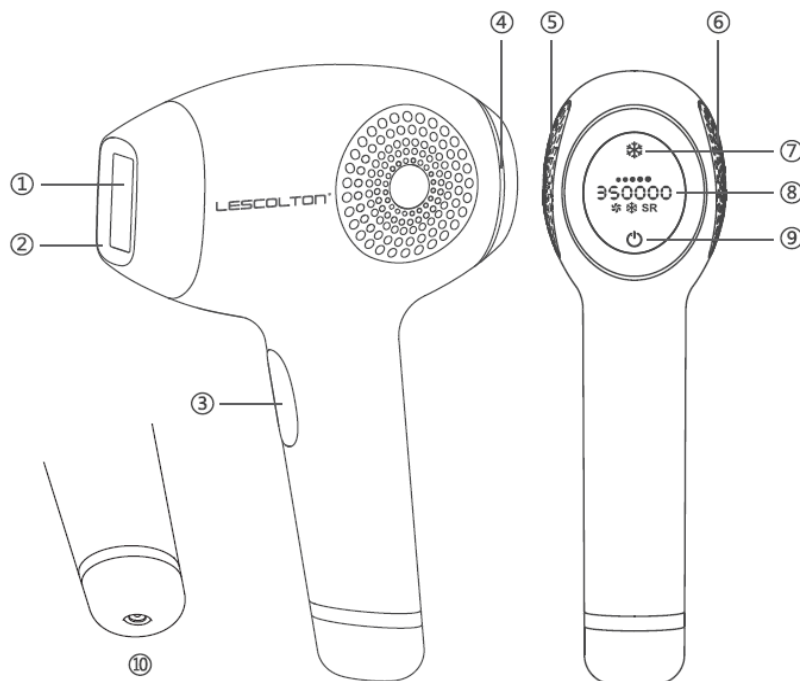

1	Lampa błyskowa	6	Wylot powietrza
2	Panel chłodzący	7	Przycisk trybu pracy
3	Przycisk światła	8	Wyświetlacz
4	Wskaźnik gotowości	9	Włącz/wyłącz/moc
5	Wlot powietrza	10	Zasilanie

4. Budowa ekranu wyświetlacza

Wyświetlanie ekranu po włączeniu urządzenia:

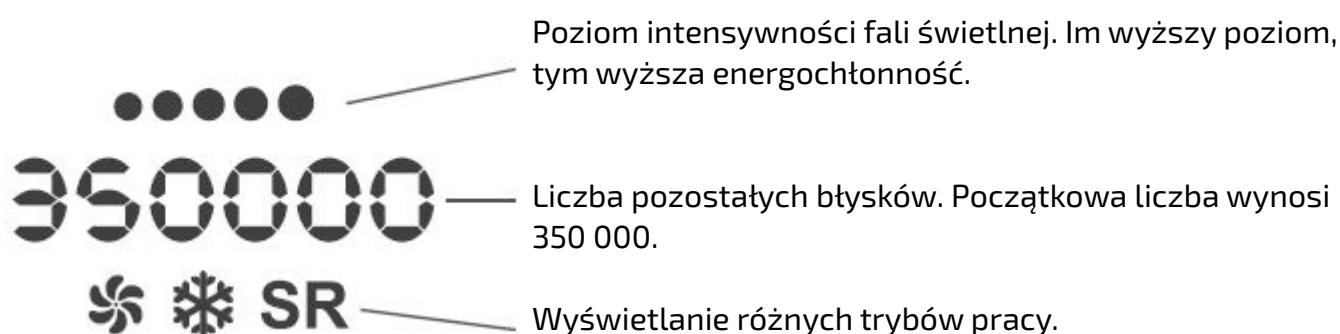

5. Tryby pracy

1. Włącz urządzenie zgodnie z instrukcją. Ikona depilacji włosów pojawi się na dole ekranu wyświetlacza. Naciśnij przycisk do przetaczania trybu pracy i ustaw dopasowany tryb pod siebie.
2. Wyświetlona ikona ❄️ oznacza: urządzenie jest w trybie chłodzenia skóry.
Wyświetlona ikona **SR** oznacza: urządzenie jest w trybie odmładzania skóry.
Brak ikony **SR** oznacza: urządzenie jest w trybie usuwania włosów. Poniżej znajdują się opisy ikon trybu pracy.

❄️❄️	Tryb chłodu + depilacja włosów
❄️❄️ SR	Tryb chłodu + odmłodzenie skóry
❄️ SR	Odmłodzenie skóry
❄️	Depilacja włosów


⚠️ Uwagi:

Po dłuższym czasie działania urządzenia w trybie chłodzenia, w ramach bezpieczeństwa nie można zmienić trybu pracy na inny, niż taki który nie współpracuje z trybem chłodzenia. Jeżeli chcesz zmienić tryb np. depilacji włosów bez chłodzenia lub odmłodzenie skóry również bez chłodzenia, należy wyłączyć urządzenie i odczekać 20 minut, aby urządzenie mogło osiągnąć odpowiednią temperaturę (w momencie wyłączenia trybu chłodzenia, urządzenie nie może dotykać skóry). Następnie proszę

włączyć urządzenie i dostosować tryb pracy do swoich potrzeb.

6. Tryb chłodzenia

1. Urządzenie po włączeniu domyślnie pracuje w trybie manualnym. W następujących dwóch trybach pracy: można używać urządzenia w trybie automatycznym bez konieczności naciskania przycisku wyzwania błysku.

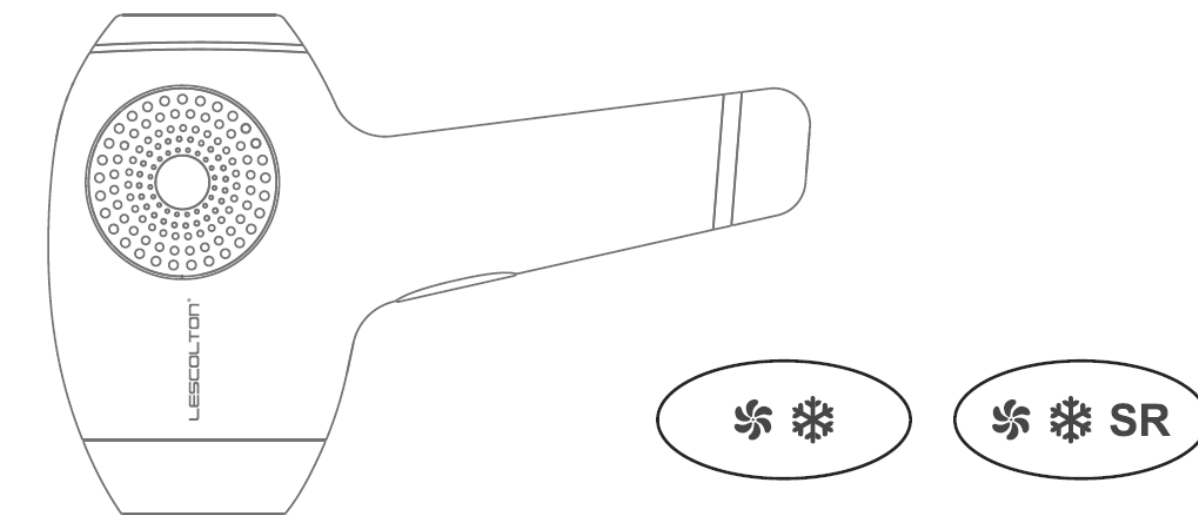

2. Używaj urządzenia w pozycji pionowej względem skóry.

Uwagi:

Podczas używania urządzenia w trybie chłodzenia należy w ciągu 5 minut krótko nacisnąć przycisk regulacji poziomu mocy, aby utrzymać urządzenie w stanie pracy. Jeżeli nie naciśniesz przycisku zmiany regulacji poziomu mocy przynajmniej raz w ciągu 5 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy. Należy wtedy na nowo włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Włączania przez 2 sekundy.

Przed pierwszym użyciem

Należy określić, jaki poziom mocy błysku jest odpowiedni dla Twojej skóry oraz do obszaru, na którym chcesz skorzystać urządzenia. Depilator wyposażony jest w 5 poziomów mocy od 1 (najniższa moc) do 5 (najwyższa moc).

7. Test wrażliwości skóry

Jeśli używasz produktu po raz pierwszy lub po raz pierwszy na nowym obszarze ciała, najpierw wybierz jeden mały obszar, aby wykonać test wrażliwości skóry. Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Włącz urządzenie zgodnie z instrukcjami pokazanymi później.
2. Wybierz niski poziom, 1 lub 2.
3. Wykonaj test na wybranym obszarze zgodnie z instrukcją obsługi i przy użyciu szczególnej ostrożności.
4. Sprawdź stan skóry po 30 minutach.
5. Jeśli skóra na badanym obszarze jest w normie, możesz kontynuować używanie produktu. Jeśli na skórze pojawi się czerwony obrzęk, poczekaj 24 godziny i sprawdź ponownie.


8. Jak używać



1. Przed użyciem zgól wszystkie włosy wokół obszaru zabiegu. Oczyszć i przetrzyj obszar ciała, aby osiągnąć najlepszy efekt depilacji.




2. Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda adaptera urządzenia.

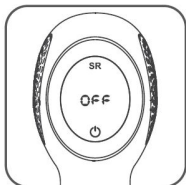

3. Podłącz urządzenie do gniazda zasilania, stan wyświetlacza jest "OFF" (wyłączony).

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Włączania** przez 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Domyślnie ustawi się tryb depilacji z chłodzeniem. Jeżeli chcesz zmienić tryb pracy, należy krótko nacisnąć przycisk zmiany trybu pracy.

5. Depilator ma 5 poziomów mocy (1-5), poziom 1 jest domyślny po włączeniu. Dostosuj poziom depilacji poprzez naciśnięcie przycisku regulacji poziomu. Zaczynaj używać niższego poziomu, a następnie stopniowo zwiększaj, jeśli czujesz się pewnie. Dostosuj poziom zgodnie z możliwościami adaptacji własnej skóry.

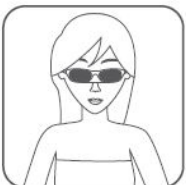

6. Noś ochronne okulary podczas korzystania z urządzenia (lub normalne okulary przeciwsłoneczne), aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

7. Ustawianie emisji światła ręcznego i emisji światła automatycznego:

Ustawienie ręcznej emisji światła (zalecana do małych obszarów)

Domyślnym ustawieniem jest emisja światła ręcznego, zaraz po włączeniu urządzenia.

Ustawianie automatycznej emisji światła (zalecana do dużych obszarów)

Po uruchomieniu urządzenia, przytrzymaj przycisk światła na 2 sekundy, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk, oznacza to, że urządzenie już zmieniło tryb wyzwalania światła. Wystarczy zbliżyć lampę do skóry, a depilator będzie w trybie automatycznym.

Uwaga: Kiedy emitowane jest światło automatycznie, należy uważać, aby nie wystawiać innych na działanie lampy i nie pozwalać innym dotykać lampy.


Przełącz na emisję światła ręcznego:

Kiedy przyrząd kosmetyczny emituje światło automatycznie, wciśnij przycisk światła

przez 2 sekundy, usłyszysz charakterystyczny dźwięk, oznacza to, że zmienił się tryb wyzwalań światła z automatycznego na ręczny.

8. Przyłóż lampę dokładnie do obszaru depilacji i spróbuj ustawić lampę pod kątem prostym do skóry:

1) Kiedy urządzenie jest w trybie ręcznym, wskaźniki gotowości migają, naciśnij przycisk światła, aby napromieniować obszar ciała. Następnie przesun lampę w kierunku następnego obszaru depilacji i przyłóż ją do skóry, gdy wskaźniki gotowości migają, naciśnij przycisk światła, aby napromieniować dany obszar. Powtarzaj te kroki wielokrotnie. Zaleca się napromieniowanie jednego obszaru od 2 do 3 razy.

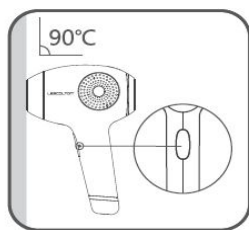

2) Gdy światło emitowane jest automatycznie, urządzenie będzie świeciło automatycznie, więc nie musisz naciskać przycisku światła. Następnie przesun lampę w kierunku następnego obszaru zabiegu i przyłóż ją do skóry, a następnie urządzenie zaświeci się automatycznie. Powtarzaj te kroki wielokrotnie. Zaleca się napromieniowanie jednego obszaru od 2 do 3 razy.

9. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłączenia przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Depilator wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli nic na nim nie zrobisz.

10. Odłącz adapter i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

11. Po 20 minutach, gdy lampa jest schłodzona, wytrzyj wylot lampy miękką czystą ściereczką.

12. Po oczyszczeniu umieść urządzenie w pudełku. Następnie umieść pudełko w dobrze wentylowanym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

13. Po 10 minutach oczyść skórę depilowaną i nawilż ją przy użyciu produktów do pielęgnacji skóry. Jeśli czujesz się niekomfortowo, nałóż na skórę zimny kompres na 30-60 minut.

Uwaga:

- Nanieś żel aloesowy lub produkt nawilżający na skórę depilowaną. Nie używaj natychmiast drażniących kosmetyków.
- Proszę zadbać o czystość skóry depilowanej przed zabiegiem. Zaleca się stosowanie zimnej wody do mycia skóry.
- W ciągu 2 godzin po zabiegu skóra depilowana nie może być zwilżona wodą. Nie opalaj się, nie bierz ciepłej kąpieli, nie wchodź do łaźni parowej w ciągu 48 godzin. Staraj się unikać wystawiania skóry depilowanej na jasne słońce w ciągu 2 godzin po zabiegu.
- Nie należy kąpać się w basenie w ciągu 48 godzin po zabiegu.

9. Przebieg zabiegów

Pierwszy miesiąc (raz na 3-5 dni)

Włosy lub skóra nie zmieniają wyglądu. Proszę poczekać cierpliwie, wynik Cię zaskoczy.

Drugi miesiąc (raz w tygodniu)

Włosy będą cienkie i miękkie. Zobaczysz mieszki włosowe z włosami lecące pod prysznicem.

Trzeci miesiąc (raz na 15 dni)

Wzrost większości nowych włosów został obniżony. Pozostałe włosy możesz delikatnie oskubać. W depilowanych obszarach rośnie tylko kilka włosów.

Czwarty miesiąc (raz na 30 dni)

Brak włosów. Na zawsze usunąłeś wszystkie włosy w obszarze zabiegu. Będziesz właścicielem doskonałej skóry na zawsze.

10. Metoda działania odmładzania skóry

1. Zmień tryb pracy urządzenia na tryb odmładzania SR.
2. Naciśnij przycisk regulacji poziomu, aby ustawić poziom 1, skieruj lampę w miejsce wymagające odmłodzenia skóry w celu napromieniowania. Sugeruje się napromienianie każdego obszaru za jednym razem i robienie tego raz lub dwa razy w tygodniu. Widoczny jest efekt po zabiegu przez 2-3 miesiące.

11. Działania niepożądane

Uczucie podrażnienia skóry

Nawet jeśli domowa depilacja światłem pulsacyjnym jest na ogół dobrze tolerowana, większość osób, która ją stosuje, w trakcie zabiegu odbiera wrażenie podrażnienia skóry, które często opisywane jest jako ukłucie na obszarze poddawanych zabiegowi. Generalnie uczucie to utrzymuje się przez czas trwania zabiegu lub do paru minut po jego zakończeniu. Każdy inny rodzaj dyskomfortu wykraczający poza ten opisany powyżej jest nietypowy i oznacza, że albo musisz przerwać zabieg, bo źle go znosisz albo musisz zmniejszyć wybraną moc.

Zaczerwienienie

To normalne, możesz czuć się trochę niekomfortowo. Twoja skóra może się zaczerwienić zaraz po zakończeniu zabiegu depilatorem laserowym albo w ciągu 24 godzin od zakończenia zabiegu. Najczęściej zaczerwienienie znika w ciągu 24 godzin. Jeśli zaczerwienienie utrzymuje się dłużej niż 2-3 dni, skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Zapach spalonych włosów

Oznacza to, że przed użyciem nie zgoliłeś wszystkich włosów. To normalne.


12. Specyfikacja

Model	T-011C
Wymiary	211x138x60mm
Powierzchnia błysku	3,6cm ²
Zasilanie	Napięcie: 100-240V AC-50/60HZ DC 24V—1.9A
Moc	40W±5W
Waga	320g
Środowisko działania	Temp. 5-40°C Wilgotność: 20-90%, bez kondensacji
Środowisko przechowywania	Temp: -20-55°C Wilgotność: 5-95%, bez kondensacji

13. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Kabel zasilający nie jest prawidłowo podłączony.	Podłącz kabel zasilania.
Urządzenie nie załącza się	Przycisk uruchamiania nie został przytrzymany przez ponad 2 sekundy.	Podczas uruchamiania należy przytrzymać przycisk uruchamiania przez co najmniej 2 sekundy.
Światło nie jest emitowane po naciśnięciu przycisku wyzwalania błysku	1. Lampa nie dotknęła skóry. 2. Magazynowanie energii elektrycznej nie zostało zakończone. Kontrolka gotowości nie miga.	1. Ponownie dotknij skóry. 2. Zaczekaj, aż kontrolka gotowości zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk wyzwalania błysku.
Automatyczne wyłączenie	Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk 'Włącz' przez 2 sekundy, aby uruchomić depilator.

14. Odpowiednie zastosowanie

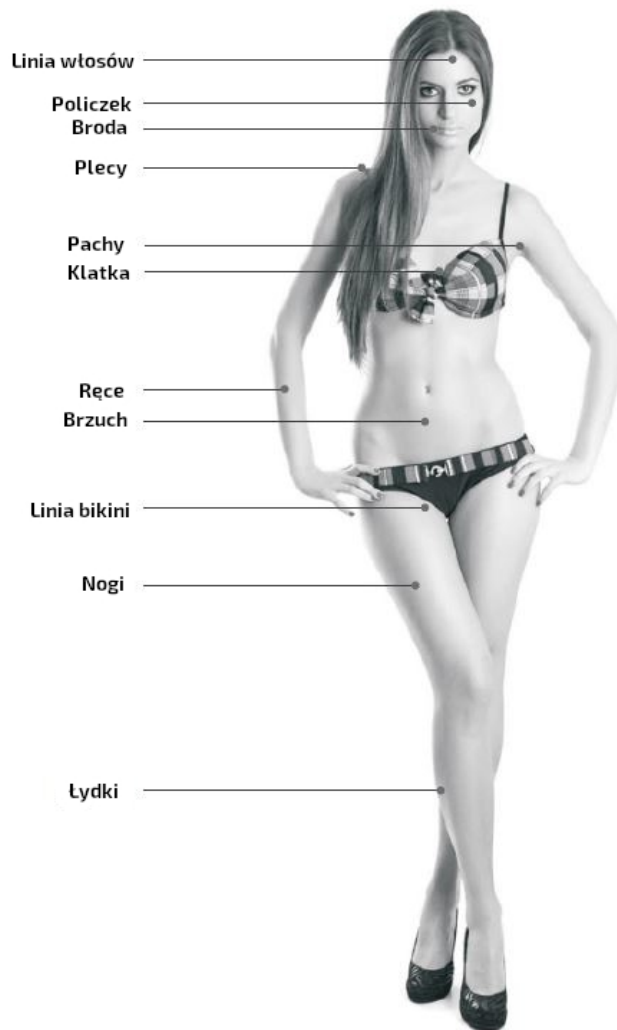

15. Częste pytania

1. Czy depilator laserowy rzeczywiście jest skuteczny?

Tak. Testy kliniczne przeprowadzone przez lekarzy dowiodły, że depilator laserowy w bezpieczny sposób zapewnia długotrwałe rezultaty.

2. Jakie części ciała można poddawać zabiegom depilatorem laserowym ?

Depilator laserowy został zaprojektowany do usuwania owłosienia na ciele. Części ciała najczęściej poddawane zabiegom depilatorem to: nogi, pachy, ręce i linia bikini.

3. Ile trwa zabieg depilatorem laserowym?

Długość sesji zależy od części ciała poddawanej zabiegowi. Depilacja nóg z przodu lub z tyłu może zająć 40 minut, natomiast depilacja pach 10 minut. Depilator laserowy jest elektryczny i może być używany do zabiegu na danej części ciała tak długo, jak jest to konieczne.

4. Czy depilator laserowy jest bezpieczny?

Twoje bezpieczeństwo było dla nas priorytetem, gdy projektowaliśmy depilator

laserowy. W procesie testowania i zatwierdzania depilatora laserowego do użytku domowego kierowaliśmy się bardzo wysokimi standardami. Jednakże tak jak w przypadku każdego elektrycznego urządzenia wchodzącego w kontakt ze skórą, użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcją i dokładnie stosować się do środków ostrożności.

5. Czy zabiegi depilatorem laserowym są bolesne?

Stosowany właściwie, depilator laserowy u większości użytkowników wywołuje jedynie delikatne uczucie ciepła, gdy urządzenie emituje impuls. Użytkownicy o ciemnych i grubych włosach mogą odczuwać trochę większy dyskomfort. Dyskomfort ten zmniejsza się i znika całkowicie pod koniec zabiegu. Dla twojej wygody depilator laserowy ma 5 poziomów intensywności mocy dostosowanych do twojej wrażliwości.

6. Jak często powinienem używać depilatora laserowego?

Pierwsze 3 albo 4 zabiegi przy użyciu depilatora laserowego powinny być w odstępach dwutygodniowych. Zabiegi od 5-ego do 7-ego powinny odbywać się w odstępach czterech tygodni. Zabiegi należy wykonywać, gdy włosy odrastają, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

7. Czy depilator laserowy jest skuteczny w przypadku białych, siwych bądź jasnych włosów?

Depilator laserowy jest najskuteczniejszy w przypadku ciemnych włosów lub włosów zawierających dużo melaniny. Melanina to pigment, który nadaje kolor twojej skórze i włosom i absorbuje energię optyczną. Czarne lub ciemnobrązowe włosy będą najbardziej podatne na zabieg. Jeśli brązowe lub jasnobrązowe włosy dobrze reagują na zabieg, trzeba będzie wykonać więcej sesji. Rude włosy także mogą częściowo dobrze reagować na zabieg. Generalnie, białe, siwe lub blond włosy nie reagują na zabieg, jednakże niektórzy użytkownicy zauważają efekty po paru zabiegach depilacji.

8. Czy mogę stosować depilator laserowy na brązową lub czarną skórę?

Nie stosuj depilatora laserowego na naturalnie brązową skórę! Depilator laserowy usuwa owłosienie, celując w pigment znajdujący się w mieszkach włosowych. Pigmenty w różnych ilościach znajdują się również w otaczających tkankach skórnych. Od ilości pigmentu w skórze właściwej danej osoby (który uwidacznia się poprzez kolor skóry) zależy poziom ryzyka, na jaki jest wystawiona, używając depilatora laserowego. Poddawanie zabiegowi depilatorem laserowym skóry ciemnej może nieść za sobą ryzyko: oparzeń, pęcherzy, przebarwień i odbarwień skóry (hiperpigmentacji lub hipopigmentacji). Depilator laserowy został wyposażony w wyjątkowy czujnik bezpieczeństwa wykrywający kolor skóry.

9. Kiedy zobaczę pierwsze rezultaty depilacji depilatorem laserowym?

Jak w przypadku wszystkich metod depilacji laserowej lub fotodepilacji, efekty nie są natychmiastowe. Można mieć nawet wrażenie, że nic się nie dzieje. Zdarza się, że po zabiegu włosy nadal rosną, ale po dwóch tygodniach większość z nich po prostu wypada. Dlatego też potrzeba paru zabiegów, żeby osiągnąć oczekiwane rezultaty.

10. Czy mężczyźni mogą używać depilatora laserowego?

Depilator laserowy może być używany przez mężczyzn. Jednakże włosy męskie, szczególnie te na klatce piersiowej, będą wymagać większej ilości zabiegów, by osiągnąć pożądany efekt.

11. Czemu włosy odrastają na obszarze skóry, który poddawałem zabiegowi w zeszłym tygodniu?

Bardzo często włosy rosną przez tydzień lub dwa po depilacji depilatorem laserowym. Proces ten nazywany jest „wyrzutem”. Po dwóch tygodniach zauważysz, że włosy zaczynają wypadać, wychodzić z mieszka włosowego. Zalecamy, żebyś nie wyrwał włosa z mieszka włosowego. Pozwól mu naturalnie wypaść. Ponadto część włosów nie zareaguje na zabieg depilatorem laserowym z powodu słabej aplikacji lub w wyniku tego, iż znajdują się w fazie uśpiania. Te włosy będą poddane zabiegowi w kolejnych sesjach, stąd potrzeba odbycia paru sesji depilatorem laserowym IPL w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów.

12. Słyszałam, że po fotodepilacji niektóre włosy odrastają jaśniejsze i cieńsze. Czy to prawda?

Fenomen ten został dobrze udokumentowany przez specjalistów ds. urody i lekarzy, którzy wykonują zabiegi depilacji laserem lub światłem pulsacyjnym. A zatem jest to możliwe, że po depilacji depilatorem laserowym niektóre włosy odrosną jaśniejsze i cieńsze. Zasadniczo włosy te stanowią niewielki odsetek w porównaniu z wyjściowym owłosieniem. Zabiegi powinny być kontynuowane, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

13. Czy długotrwałe użytkowanie depilatora laserowego jest niebezpieczne dla mojej skóry?

W ciągu ostatnich 15 lat, używanie lasera i światła pulsacyjnego w medycynie estetycznej zostało dobrze udokumentowane w profesjonalnych dziennikach badań. Dzienniki te i instytucje nie zgłosiły żadnych skutków ubocznych czy uszkodzeń związanych z długotrwałym użytkowaniem lasera, czy światła pulsacyjnego.

14. Czy można używać depilatora laserowego do usuwania owłosienia na twarzy i brodzie?

Depilatora laserowego nie należy używać do zabiegów usuwania owłosienia na twarzy. Unikaj ekspozycji na światło słoneczne przed zabiegiem i po zabiegu depilatorem laserowym, niezależnie którą część ciała poddajesz zabiegowi. Używaj odpowiedniego zabezpieczenia np. odpowiedniej garderoby ochronnej lub kremu z filtrem (z filtrem powyżej 50), który powinieneś aplikować regularnie przez trzy tygodnie przed zabiegiem i po zabiegu.

15. Jak długo należy odczekać z depilacją depilatorem laserowym, jeśli nie jestem chroniony od promieni słonecznych?

Jeśli wystawiałeś się na działanie promieni słonecznych bez odpowiedniej ochrony, powinieneś poczekać cztery tygodnie z depilacją depilatorem laserowym IPL.

16. Co należy robić przed użyciem depilatora laserowego?

Ważne jest, by przed każdym zabiegiem depilatorem laserowym przynajmniej przez cztery tygodnie nie wystawiać na działanie promieni słonecznych skóry, która ma być

poddana zabiegowi. W odpowiednim zabezpieczeniu skóry może pomóc krem z wysokim filtrem (filtr 50+), jak również odpowiednia garderoba chroniąca dany obszar ciała. Ponadto powierzchnia zabiegowa powinna zostać dokładnie ogolona i umyta wodą z mydłem.

17. W jaki sposób dbać o skórę po zabiegu depilatorem laserowym?

Do mycia i pielęgnacji obszaru poddawanego zabiegowi depilatorem laserowym można używać dobrze znanych produktów do pielęgnacji skóry. Należy jednak przedsięwziąć specjalne środki ostrożności i unikać ekspozycji słonecznej. Należy stosować kremy z wysokim filtrem (filtr 50+) oraz zakładać ubrania na długi rękaw, by osłonić skórę od słońca.

18. Czy należy usuwać włosy przed zabiegami, między zabiegami i po zabiegach?

Nie, nie należy tego robić. Włosy wypadną same w sposób stopniowy i naturalny. Proces ten może trwać do dwóch tygodni.

19. Czy regulacja poziomu mocy dotyczy również regulacji chłodzenia?

Regulacja poziomu mocy dotyczy tylko i wyłącznie poziomu mocy błysku i nie ma żadnego wpływu na poziom uczucia chłodu.

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041



Znajdź nas:



newelectricshop



new-electric